

Cardinal Health^{MC}

Traitement des plaies par pression négative

Utilisation du dispositif TPPN PRO de Cardinal Health^{MC}
sur le bateau-hôpital Africa Mercy de Mercy Ships

Missy Brown, infirmière, CNOR, RNFA-OR,
chargée de formation clinique, Africa Mercy Toamasina, Madagascar

Ce dispositif a constitué l'un des éléments du traitement d'une plaie du cuir chevelu étendue et infectée, consécutive à une brûlure profonde d'origine électrique.

Résumé du cas

Le patient travaillait sur le toit d'un bâtiment de Madagascar quand un câble électrique sous tension lui est tombé sur la tête, lui occasionnant une brûlure étendue au troisième degré. Le personnel de l'hôpital de la mission locale a procédé à un débridement chirurgical afin de retirer les tissus dévitalisés, avant de recouvrir l'os, mis à nu, d'un tissu autologue.

La greffe n'ayant pris que partiellement, une nécrose étendue du tissu est apparue et une partie importante du crâne est restée dénudée. L'infection n'a pas tardé à suivre.



Réhospitalisation avec greffe infectée



Scalp prêt à recevoir une greffe de peau

Plan d'étude

Le patient a été évalué par une infirmière et un médecin spécialisés dans le traitement des plaies sur l'Africa Mercy, le plus grand navire-hôpital non gouvernemental au monde. Son crâne présentait de larges plaies infectées et le patient n'avait pas recouvré toute sa mobilité après sa blessure d'origine électrique. En salle d'opération, on a procédé à un débridement chirurgical intensif, avant de placer sur la plaie une garniture souple reliée à un dispositif TPPN PRO de Cardinal Health^{MC}.




Mise en œuvre du dispositif TPPN PRO
Cardinal Health^{MC}

Résultats

Des dispositifs TPPN PRO de Cardinal Health^{MC} ont été maintenus en action sur le patient pendant environ 12 semaines, le temps que la plaie atteigne le stade de granulation voulu pour permettre une greffe de peau.

La greffe réalisée, le patient a obtenu son congé après convalescence et examen de suivi.

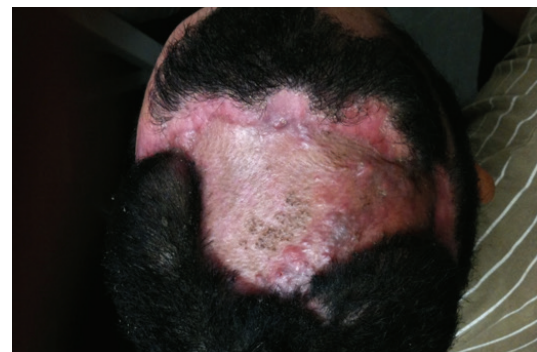

Résultat, une fois la greffe prise

Discussion

Le dispositif TPPN PRO de Cardinal Health^{MC} s'est avéré une précieuse aide au traitement de la brûlure décrite ici. Facile à transporter et à utiliser, l'appareil a favorisé l'évolution de la plaie jusqu'à un stade rendant possible une greffe de peau.

Simplicité et efficacité du traitement, facilité de transport de l'équipement requis : toutes choses essentielles pour n'importe quel patient, mais spécialement sur le plus grand navire-hôpital non gouvernemental au monde, sans compter que les plus démunis de la planète ont aussi besoin des soins de qualité.

L'information présentée dans cette étude de cas a trait à ce patient en particulier et ne doit en aucun cas remplacer les conseils d'un médecin, le diagnostic ou le traitement. Demandez toujours l'avis d'un médecin habilité ou d'un autre professionnel de la santé qualifié.

Pour en savoir plus ou pour commander, communiquez dès maintenant avec votre **représentant des ventes** de Cardinal Health Canada ou **appelez au :**
Soins hospitaliers – 1.888.291.5033
Soins parahospitaliers – 1.877.878.7778



cardinalhealth.ca

Pour connaître les indications, les contre-indications, les précautions et autres détails entourant la sécurité, veuillez consulter le manuel d'utilisation du dispositif TPPN PRO de Cardinal Health^{MC}.
Mise en garde : Selon la loi fédérale américaine, seul un médecin peut vendre ou prescrire le dispositif décrit ici.

© Cardinal Health Canada, 2019. Tous droits réservés. CARDINAL HEALTH, le LOGO Cardinal Health et ESSENTIEL AUX SOINS DE SANTÉ sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cardinal Health. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.
N° de document CA : 2MC15-391125, 19-133-B (7/2019)


CardinalHealth
Essentiel aux soins de santé^{MC}