



Sonde d'alimentation

Brochure sur les soins à domicile
à l'intention des patients



Qu'est-ce qu'une sonde d'alimentation?

Une sonde de gastrostomie est une sonde ou un bouton (dispositif de gastrostomie percutanée) qui est placé dans l'estomac, ou parfois dans l'intestin grêle, à travers la paroi abdominale, par intervention chirurgicale. L'objectif est de procurer un soutien nutritionnel aux personnes qui ne sont pas en mesure d'avoir un apport calorique ou nutritionnel suffisant seulement par l'alimentation. Une pompe, une seringue ou un sac d'alimentation par gravité est utilisé pour faire parvenir la préparation à l'estomac par le biais de cette sonde.



Type et marque de la sonde

Nom : _____

☐ Gastrique ☐ Jéjunal ☐ Autre : _____

Taille de la sonde : _____ Fr Longueur de la sonde : _____ ou S. O.

Date et endroit de l'insertion : _____

Entretien et manipulation de la sonde

- Toujours se laver les mains avant l'alimentation ou avant l'entretien de la sonde.
- Pendant les deux premières semaines, nettoyer la peau et le disque à l'aide d'une solution physiologique salée pour éliminer les sécrétions séchées. Lorsque la stomie est cicatrisée, vous pouvez poursuivre vos activités habituelles, y compris la nage, le sport, etc.
- À chaque administration, examiner la peau autour de la sonde. Nettoyer la zone chaque jour avec de l'eau, la savonner et la rincer minutieusement, puis l'assécher en tapotant.
- Aucun pansement ni onguent n'est nécessaire si la peau est saine.
- Rincer souvent la sonde avec de l'eau au moyen d'une seringue afin de prévenir l'obstruction.
- Rincer la sonde avant et après chaque administration de nourriture, avant et après l'administration de médicaments, et au moins toutes les 4 heures pendant l'alimentation continue.
- Pour les sondes ENFit^{MC}, ne PAS trop remplir la sonde ni la serrer trop fort.

Qu'est-ce que le connecteur ENFit^{MC}?

Le connecteur ENFit^{MC} est la nouvelle norme ISO pour le branchement des systèmes de nutrition entérale, comme les ensembles et les sondes d'alimentation. Tous les produits de nutrition entérale seront bientôt dotés de connecteurs ENFit^{MC} pour réduire la fréquence des problèmes de branchement de tubulures médicales.




Connecteurs actuels



Connecteurs ENFit^{MC}

Les connecteurs ENFit^{MC} sont différents des connecteurs actuels « en forme de sapin de Noël ». Il faut retirer le raccord de transition blanc qui est fixé à l'ensemble d'alimentation avant de brancher l'ensemble d'alimentation à la sonde d'alimentation.

Visitez notre site Web pour apprendre comment brancher et débrancher les systèmes de raccord ENFit^{MC} : www.cardinalhealth.ca/en/products-and-services/resources/nutritional

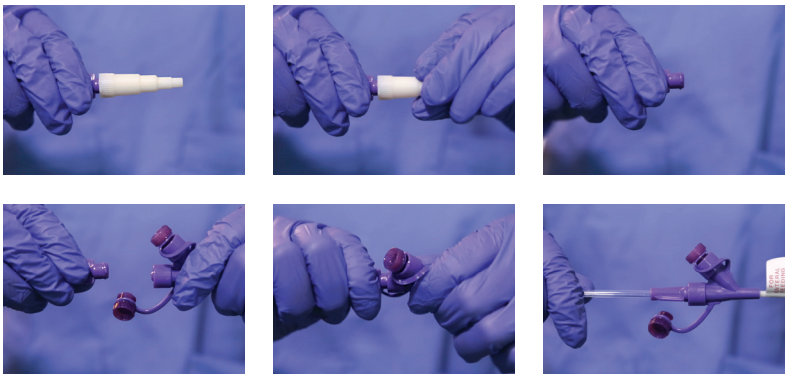

Le connecteur ENFit^{MC} doit être utilisé avec une seringue ENFit^{MC} pour brancher l'ensemble d'alimentation et la sonde d'alimentation. On utilise habituellement une seringue de 60 mL.

Seringues Monoject^{MC}

Z460SG	Seringue orale mauve stérile de 60 mL, embout standard
Z8881160015	Seringue entérale non stérile de 60 mL, embout ENFit^{MC}
Z460SE	Seringue entérale stérile de 60 mL, embout ENFit^{MC}

Kangaroo^{MC} Joey et Connect

Pompe d'alimentation entérale et tubulure de pompe Kangaroo^{MC} Joey

Z883400	Pompe d'alimentation entérale avec pince de potence et adaptateur Kangaroo ^{MC} Joey
Z762055	Tubulure de pompe de 500 mL Kangaroo ^{MC} Joey
Z763656	Tubulure de pompe de 1 000 mL Kangaroo ^{MC} Joey

Pompe d'alimentation entérale et tubulure de pompe Kangaroo^{MC} Connect

Z884400	Pompe d'alimentation entérale avec pince de potence et adaptateur Kangaroo ^{MC} Connect
Z77500FD	Ensemble avec sac de 500 mL Kangaroo ^{MC} Connect
Z77100FD	Ensemble avec sac de 1000 mL Kangaroo ^{MC} Connect

Sondes de gastrostomie Kangaroo^{MC} avec ports en Y

Code du modèle non ENFit ^{MC}	Code du modèle ENFit ^{MC}	
Z8884715122	Z8884715122E	12 Fr
Z8884715148	Z8884715148E	14 Fr
Z8884720163	Z8884720163E	16 Fr
Z8884720189	Z8884720189E	18 Fr
Z8884720205	Z8884720205E	20 Fr

D'autres tailles allant jusqu'à 28 Fr sont offertes; veuillez communiquer avec votre détaillant pour obtenir de plus amples renseignements.

Si vous utilisez une pompe d'alimentation en Ontario, vous êtes peut-être admissible à l'aide financière du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web suivant :

www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels

Remarques

cardinalhealth.ca

©2020 Cardinal Health Canada. Tous droits réservés. CARDINAL HEALTH, le LOGO Cardinal Health, Kangaroo, Monoject et ESSENTIEL AUX SOINS DE SANTÉ sont des marques de commerce de Cardinal Health et peuvent être déposées aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays. N° de document CA : 20-024-B (4/2020)

