


Kendall^{MC} Electrodes de surveillance néonatale-pédiatrique précâblée

Maximiser vos résultats

1 Préparation de la peau

- Préparer la peau selon le protocole de l'établissement.
- Appliquer l'électrode sur une peau propre et sèche.

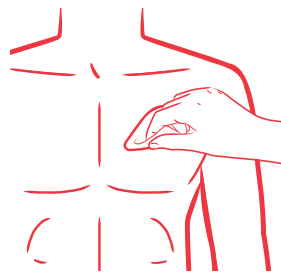

2 Application

- Sortir les électrodes de l'emballage uniquement avant l'usage.
- Appliquer l'électrode sur la peau.
- S'assurer que le centre et les bords de l'électrode sont en contact avec la peau.
- Appliquer une légère pression pour assurer une bonne adhérence.
- Brancher les connecteur dans le câble.



3 Tracé

- S'assurer que la connexion du câble est propre et bien en place.
- Changer l'électrode selon le protocole de l'établissement ou dans les 72 h.



4 Retirer et Jeter

- Décoller l'électrode doucement en soulevant le rebord.
- A usage unique.
- **NE PAS** tirer sur le fil pour retirer l'électrode.*

***Attention:** Cette étape est extrêmement importante pour assurer le retrait de l'électrode et doit être suivie prudemment.

