

Product Description

BIHOCL™ PureCleanse™ is a safe and effective irrigation, moisturizing, and debridement solution formulated to actively cleanse wounds and prepare the wound bed for healing. With no clinical contraindications for use, it can be used to prepare the wound bed for healing in a safe, effective and natural way.

Indications

BIHOCL™ PureCleanse™ is intended for cleansing, irrigating, moistening, debridement, and removal of foreign material including microorganisms and debris from exudating and/or dirty wounds, acute and chronic dermal lesions such as stage I-IV pressure ulcers, stasis ulcers, diabetic ulcers, post-surgical wounds, first and second degree burns, abrasions, minor irritations of the skin, diabetic foot ulcers, ingrown toenails, grafted and donor sites, and exit sites. It is also intended for moistening and lubricating absorbent wound dressings. The product is safe for use on adult and adolescent patients.

Ingredients

Water, sodium chloride, and 0.033% hypochlorous acid (330 PPM) as a preservative to inhibit growth of microorganisms within the solution.

Storage

Store the product in a room temperature environment and away from direct sunlight, heat, or extreme cold. Do not freeze. For adequate efficacy, do not use the solution past its expiration date (printed on the bottle itself).

Disposal

Dispose of remaining BIHOCL™ PureCleanse™ solution. Place bottle and sprayer in the regular waste disposal or biohazard waste disposal (if applicable). All components of the product packaging are recyclable. Please recycle wherever possible.

Instructions

To prepare for use, remove the sprayer from the protective pouch, remove the safety seal from the bottle, and firmly screw the sprayer onto the bottle.

1. Using a firm, consistent spray, direct the stream of solution onto the skin or wound, ensuring complete coverage.
2. Wait at least one minute. No rinsing is required.
3. No special disposal considerations are required.


Contraindications

Do not use on patients with known sensitivity to hypochlorous acid (HOCl).

Cautions

Not for injection. Single use only. Discontinue use immediately if irritation, sensitization, or reaction occurs. Keep out of reach of children.

This product is non-pyrogenic and is not made with natural rubber latex.

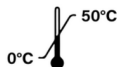

Rx ONLY

MD



Health Canada Class II Medical Device License (MDL) #108007

Questions, comments or concerns? Please contact us.

info@biomiq.health | 1-800-573-1295 | www.biomiq.health

BIOMIQ

Manufactured for Biomiq Inc. by Sterasure Inc.

137 Glasgow St., Unit 115 Kitchener, ON N2G 4X8 Canada

Description du produit

BIHOCL[™] PureCleanse[™] est une solution sécuritaire et efficace d'irrigation, d'hydratation et de débridement, formulée pour nettoyer activement les plaies et préparer le lit de la plaie à la guérison. Sans contre-indications cliniques, elle peut être utilisée pour préparer le lit de la plaie à la guérison de manière sécuritaire, efficace et naturelle.

Indications médicales

BIHOCL[™] PureCleanse[™] est destiné au nettoyage, à l'irrigation, à l'humidification, au débridement et à l'élimination des corps étrangers, y compris les micro-organismes et les débris des plaies exsudatives et/ou sales, des lésions cutanées aiguës et chroniques telles que les stades 1 à 4 des ulcères de pression, ulcères de stase, ulcères diabétiques, plaies post-chirurgicales, brûlures au premier et au deuxième degré, écorchures, les irritations mineures, ulcères du pied diabétique, ongles incarnés, sites greffés, sites donneurs et les sites d'insertion. Il est également destiné à humidifier et lubrifier les pansements absorbants. Le produit est sans danger pour une utilisation chez les patients adultes et adolescents.

Ingrédients

Eau, chlorure de sodium, et acide hypochloreux (0,033 %) comme agent conservateur. Cette solution acide (HOCl) agit contre la croissance des micro-organismes dans la solution.

Conservation

Conservez le produit dans un environnement à température ambiante et à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur excessive ou du froid extrême. Ne pas congeler. Pour une efficacité adéquate, n'utilisez pas la solution au-delà de sa date de péremption.

Disposition après usage

Éliminez la solution restante de BIHOCL[™] PureCleanse[™]. Placez le flacon et le pulvérisateur dans les déchets ordinaires ou dans les déchets biologiques (si applicable). Tous les composants de l'emballage du produit sont recyclables. Veuillez recycler autant que possible.

Des questions, des commentaires ou des préoccupations ? Veuillez nous contacter.

info@biomiq.health | 1-800-573-1295 | www.biomiq.health

Mode d'emploi

Pour préparer l'utilisation, retirez le pulvérisateur de la pochette de protection, enlevez le sceau de sécurité du flacon, puis vissez fermement le pulvérisateur sur le flacon.

1. En utilisant une pulvérisation ferme et régulière, dirigez le jet de solution sur la peau ou la plaie, en veillant à une couverture complète.
2. Attendez au moins une minute. Aucun rinçage n'est nécessaire.
3. Aucune précaution particulière d'élimination n'est requise.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie ou sensibilité connue à l'acide hypochloreux.

Précautions

Ne pas injecter. À usage unique seulement. Cesser immédiatement l'utilisation en cas d'irritation, de sensibilisation ou de réaction. Tenir hors de portée des enfants.

Ce produit est non-pyrogénique et ne contient pas de latex naturel.



Rx SEULEMENT

MD



FABRIQUÉ AU CANADA



Numéro d'Homologation des Instruments Médicaux de Santé Canada
#108007

BIOMIQ

Fabriqué pour BiomIQ Inc. par Sterasure Inc.

137 rue Glasgow, Unité 115, Kitchener, ON, N2G 4X8, Canada