

Pansements Kerlix^{MC} AMD

Avantages

- Efficacité éprouvée¹**
Offrent une protection antimicrobienne à large spectre
- Sécuritaires**
Réduisent la contamination croisée entre les patients, les cliniciens et l'environnement
- Action persistante**
Résistent à la colonisation bactérienne dans le pansement. Peuvent être utilisés secs ou humides



Indications d'utilisation

- Pansement principal pour les plaies exsudatives
- Brûlures aux premier et second degrés
- Plaies chirurgicales
- Remplissage des plaies profondes

Caractéristiques des produits

- Contiennent du polyhexaméthylène biguanide (PHMB) à 0,2 %
- Peuvent être portés jusqu'à 3 jours²
- Faits de gaze à base de coton
- Hypoallergènes
- Stériles

Gamme de produits



Rouleaux de Kerlix^{MC} AMD

Compresse super Kerlix^{MC} AMD

Le saviez-vous?

Le PHMB est efficace contre³ :

- les staphylocoques à coagulase négative
- le SARM
- *Enterococcus faecalis*
- *Enterobacter cloacae*
- les ERV
- *Acinetobacter baumannii*
- *Staphylococcus epidermidis*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Escherichia coli*
- *Candida albicans*
- *Proteus mirabilis*
- *Serratia marcescens*
- *Enterobacter cloacae*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Propionibacterium acnes*

Pansements de mousse Kendall^{MC} AMD

Avantages

- Double action**
Prennent en charge l'humidité et tuent les bactéries par contact
- Résistants et durables**
Efficacité éprouvée contre la contamination répétée jusqu'à 7 jours⁴
- Barrière microbicide éprouvée**
Conçus pour le confort des patients et de meilleurs résultats. Empêchent les bactéries de passer et inhibent leur croissance à l'intérieur



Indications d'utilisation

- Plaies modérément à fortement exsudatives, comme les lésions cutanées, les ulcères veineux de la jambe, les ulcères diabétiques, les incisions post-chirurgicales, les zones donneuses de greffe, les abrasions, les lacerations et les brûlures aux premier et second degrés
- Troubles dermatologiques et plaies profondes

Caractéristiques des produits

- Contiennent du polyhexaméthylène biguanide (PHMB) à 0,5 %
- Ont une surface de mousse microstructurée à alvéoles ouverts qui absorbe l'exsudat
- Ont une action d'absorption verticale qui envoie les liquides dans la couche de base en mousse
- Ont une couche de base dense qui maximise la rétention de l'exsudat

Gamme de produits



Pansement de mousse Kendall^{MC} AMD (transfert)

Pansement de mousse Kendall^{MC} AMD avec pellicule supérieure

Pansement Kendall^{MC} AMD avec bordure de mousse (bande adhésive en acrylique)

Pansement Kendall^{MC} AMD avec bordure de mousse douce (bande adhésive en silicone)

Pansements fenêtrés Kendall^{MC} et Excilon^{MC} AMD

Avantages

- Application simple**
Ces pansements fenêtrés permettent une application rapide et facile autour des sites percutanés.
- Sécuritaires**
Testés par des dermatologues
- Efficacité éprouvée⁵**
Restent efficaces en présence de matières organiques



Indications d'utilisation

- Stomies, y compris les trachéostomies et les gastrostomies
- Sondes thoraciques et autres sites de drainage
- Disques indiqués pour les tiges orthopédiques, les cathéters centraux et les cathéters ombilicaux des nouveau-nés

Caractéristiques des produits

- Les pansements Kendall^{MC} AMD contiennent du polyhexaméthylène biguanide (PHMB) à 0,5 % et peuvent être portés jusqu'à 7 jours⁴.
- Les pansements Excilon^{MC} AMD contiennent du polyhexaméthylène biguanide (PHMB) à 0,2 % et peuvent être portés jusqu'à 3 jours².
- Stériles

Gamme de produits



Compresse Excilon^{MC} AMD

Disque de mousse Kendall^{MC} AMD

Pansement de mousse fenêtré Kendall^{MC} AMD

Pansements Curity^{MC} AMD

Avantages

Sécuritaires


Efficaces, sécuritaires et à faible toxicité¹.
Activité antimicrobienne à large spectre

Économiques

Plus économiques que la plupart des traitements antimicrobiens et des pansements en argent

Grande résistance à la traction

Facile à retirer en une seule pièce

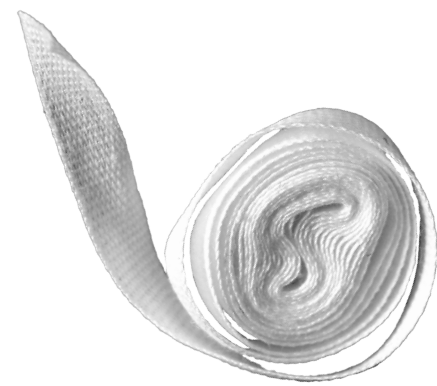

Indications d'utilisation

- Plaies aiguës et chroniques
- Plaies ouvertes tunnelisées avec mèches de coton
- Plaies chirurgicales
- Plaies nécessitant une absorption verticale

Caractéristiques des produits

- Contiennent du polyhexaméthylène biguanide (PHMB) à 0,2 %
- Peuvent être portés jusqu'à 3 jours²
- Peuvent être utilisés secs ou humides
- Stériles

Gamme de produits



Mèches de coton
Curity^{MC} AMD



Compresses
Curity^{MC} AMD

? Le saviez-vous?

Le polyhexaméthylène biguanide (PHMB) est un **antimicrobien très efficace et sûr** qui est utilisé à des fins commerciales depuis **plus de 75 ans**.
Le PHMB agit en tuant par contact et a un mode d'action unique³ :

- Il se lie à la membrane bactérienne phospholipidique (externe).
- La membrane compromise laisse fuir le cytoplasme.
- Les couches protectrices des cellules bactériennes se désintègrent.
- Les cellules bactériennes s'effondrent et meurent.
- Il ne reste rien pour la mutation ou la réplication.

N° d'article	Description	Par plateau	Par caisse
Kerlix^{MC} AMD			
Rouleaux			
Z3331	Stériles dans un plateau en plastique rigide, 6 épaisseurs, 1 rouleau/plateau, 11,4 cm x 3,7 m (4,5 po x 12,3 pi)	-	60 rouleaux
Z3332	Stériles dans un sac mou, 6 épaisseurs, 1 rouleau/paquet, 11,4 cm x 3,7 m (4,5 po x 12,3 pi)	-	100 rouleaux
Compresses super			
Z6660	Moyennes, stériles, 10 dans un plateau en plastique, 15,2 cm x 17,1 cm (6 po x 6,75 po)	-	480
Z6662	Moyennes, stériles, 2 dans un sac mou, 15,2 cm x 17,1 cm (6 po x 6,75 po)	40	480
Z6665	Moyennes, stériles, 5 dans un sac mou, 15,2 cm x 17,1 cm (6 po x 6,75 po)	50	600
Kendall^{MC} AMD			
Pansement de mousse (transfert)			
Z55522AMDX	5,1 cm x 5,1 cm (2 po x 2 po)	25	25
Z55544AMDX	10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)	10	10
Z55548AMDX	10,2 cm x 20,3 cm (4 po x 8 po)	10	10
Z55566AMDX	15,2 cm x 15,2 cm (6 po x 6 po)	10	10
Z55588AMDX	20,3 cm x 20,3 cm (8 po x 8 po)	10	10
Pansement de mousse avec pellicule supérieure			
Z55544PAMDX	10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po) avec pellicule supérieure	10	10
Pansement avec bordure de mousse (bande adhésive en acrylique)			
Z55523BAMDX	4,4 cm x 8,3 cm (1,75 po x 3,25 po) avec tampon de 2,5 cm x 4,4 cm (1 po x 1,75 po)	10	10
Z55544BAMDX	8,9 cm x 8,9 cm (3,5 po x 3,5 po) avec tampon de 5,0 cm x 5,0 cm (2 po x 2 po)	10	10
Z55546BAMDX	8,9 cm x 14 cm (3,5 po x 5,5 po) avec tampon de 5,0 cm x 10 cm (2 po x 4 po)	10	10
Z55566BAMDX	14 cm x 14 cm (5,5 po x 5,5 po) avec tampon de 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	10	10
Z55588BAMDX	19 cm x 19 cm (7,5 po x 7,5 po) avec tampon de 19 cm x 19 cm (7,5 po x 7,5 po)	10	10
Pansement avec bordure de mousse douce (bande adhésive en silicone)			
Z55523BAMDGX	4,4 cm x 8,2 cm (1,75 po x 3,25 po) avec tampon de 2,5 cm x 4,4 cm (1 po x 1,75 po)	-	50
Z55544BAMDGX	8,9 cm x 8,9 cm (3,5 po x 3,5 po) avec tampon de 5,0 cm x 5,0 cm (2 po x 2 po)	-	50
Z55546BAMDGX	8,9 cm x 14 cm (3,5 po x 5,5 po) avec tampon de 5,0 cm x 10 cm (2 po x 4 po)	-	50
Z55566BAMDGX	14 cm x 14 cm (5,5 po x 5,5 po) avec tampon de 10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	-	50
Z55588BAMDGX	19 cm x 19 cm (7,5 po x 7,5 po) avec tampon de 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po)	-	50
Pansements fenêtrés Kendall^{MC} et Excilon^{MC} AMD			
Compresses Excilon^{MC} AMD			
Z7088	Comresse pour drain, 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)	50	600
Z7089	Comresse pour I.V., 5,1 cm x 5,1 cm (2 po x 2 po)	70	1 400
Disque de mousse Kendall^{MC} AMD			
Z55511AMDX	2,54 cm (1 po) de diamètre, trou de 4 mm	10	40
Z55512AMDX	2,54 cm (1 po) de diamètre, trou de 7 mm	10	40
Pansement de mousse fenêtré Kendall^{MC} AMD			
Z55535PAMDX	Fenêtré, 8,9 cm x 7,6 cm (3,5 po x 3 po) avec pellicule supérieure	10	50
Z55535AMDX	Fenêtré, 8,9 cm x 7,6 cm (3,5 po x 3 po)	10	50
Comresse Curity^{MC} AMD			
Mèches de coton			
Z7831AMD	0,63 cm x 91,4 cm (1/4 po x 3 pi)	10	50
Z7832AMD	1,3 cm x 91,4 cm (1/2 po x 3 pi)	10	50
Z7833AMD	2,5 cm x 91,4 cm (1 po x 3 pi)	10	50
Compresses			
Z2506	Stériles, 2 dans un paquet avec pellicule à décoller, 5,1 cm x 5,1 cm (2 po x 2 po), 8 épaisseurs	100	3 000
Z2533	Stériles, 2 dans un paquet avec pellicule à décoller, 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po), 12 épaisseurs	50	1 200
Z2539	Stériles, 10 dans un plateau en plastique, 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po), 12 épaisseurs	10	1 280

Références

¹ Shah, C. et coll. Efficacy of AMD Dressings Against MRSA and VRE; Tyco Healthcare 2006

² Shah, C. et coll. Efficacy of Covidien AMD Antimicrobial Dressings Against MRSA and VRE; Covidien 2008

³ Shah, C. et coll. Risk Assessment of Kendall AMD Antimicrobial Foam Dressings Containing 0.5% PHMB; Covidien 2009

⁴ Données internes

⁵ Données internes

1 888 291-5033
shop.cardinalhealth.ca/fr/chc

© 2021 Cardinal Health Canada. Tous droits réservés. CARDINAL HEALTH, le LOGO Cardinal Health et ESSENTIEL AUX SOINS DE SANTÉ sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cardinal Health. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. N° de document CA : CA-PMR-0040, CA-PMR-0041, CA-PMR-0042, CA-PMR-0049, 18-140 (2/2021)



Le soin des plaies N'importe où^{MC}

➤ Le **PHMB** fait toute la différence.

- Kerlix^{MC} AMD
- Kendall^{MC} AMD
- Excilon^{MC} AMD
- Curity^{MC} AMD



1 888 291-5033
shop.cardinalhealth.ca/fr/chc

